

Disponibilité d'ensemble de moniteur de gestion de chute



Nous sommes fiers de notre service exceptionnel. Chez Extra Médical Inc. Notre tâche est de créer un sentiment de respect et de sécurité durant chaque transaction.

La Compagnie Smart Caregivers™ a pour objectif de fournir les meilleurs moniteurs disponibles tout en étant très économiques. Ce qui vous permet d'acquérir plus d'équipement pour assurer la sécurité et le confort de vos résidents.

Extra Medical Inc.

825 Rue Bombardier Local 14, Mascouche, Québec, Canada, J7K 3G7

Tel: 450-474-2776, Fax: 450-474-1033

Système de prévention de chute



Smart Caregiver Corporation.



Incluant

- **Nouveau!** Moniteur de gestion de chute sans fil économique (Page 2)
- **Nouveau!** Moniteur à double fonction, à cordelette et à gestion de chute pour coussinet. (Page 4)
- **Nouveau!** Coussinet sans fil et moniteur de gestion de chute. (Page 3)
- « Tamper-Proof™ » Moniteur de gestion de chute inaltérable.
- Moniteur à cordelette garantie à vie.
- Système d'appel sans fil Smart.
- Système complet anti-fugue Smart



Valeur Sans Précédent

Systeme sans fil économique

Fonctionne avec coussinet sensoriel de lit, chaise, tapis de sol, coussin de chute, bouton d'appel, détecteur de mouvement et ceinture de chaise *

* Un adaptateur sans fil peut être requis pour certains éléments



433-EC
Alarme sans fil économique.



FM-07C

Tapis de sol sans fil **



433-MS

Détecteur de mouvement



GB-90

Coussinet sensoriel de lit sans fil **



433-NC
Bouton d'appel



433-EXT

Contact d'ouverture Porte/Fenêtre

L'alarme sans fil économique 433-EC offre au personnel soignant une flexibilité et une bonne valeur avec les moniteurs de gestion de chute sans fil. Une fois configurés, les éléments sans fil communiquent directement avec le système d'alarme 433-EC et aucune autre composante n'est nécessaire. La configuration rapide permet d'utiliser le bouton d'appel, détecteur de mouvement, coussin de chute (adaptateur sans fil requis) et la série de coussinet sensoriel de lit et de chaise GHOST

Caractéristiques du système sans fil économique:

- Configuration rapide et facile d'utilisation
- Volume réglable
- Son carillon ou Alarme

Appel sans frais: 1-866-386-2776

** Brevet en cours d'homologation

Coussinet sensoriel sans fil



Sans Fil!
L'émetteur est dans le coussinet!



TM-02

L'émetteur est dans un emplacement prévu à cet effet dans le coussinet **



Nouveau!
Tapis sensoriel sans fil **

FM-07C

Tapis sensoriel sans fil **



GC-45

Coussinet sensoriel de fauteuil sans fil **

Adoptez le sans fil

Le système Smart Ghost Cord® libère le personnel soignant du câblage entre les coussinets sensoriels et le moniteur. Permet une plus grande liberté pour l'installation du moniteur (jusqu'à 50 pieds du coussinet) réduit ainsi les dangers de s'emmêler dans le câblage.

Caractéristiques du moniteur sans fil:

- Lumière appareil en fonction
- Avertisseur lumineux de pile faible
- Prise pour bouton d'appel
- Tonalité et volume ajustable
- Anti-altération (Tamper Proof Mode™)
- Indicateur de perte de connexion avec coussinet sensoriel (Pad lost indicator™)
- Réamorçage automatique

Soyez averti immédiatement du coussinet sans fil

Le personnel soignant peut être averti directement à partir d'un coussinet sensoriel au téléavertisseur de poche quand l'unité central 433-CMU est utilisé. Le moniteur n'est plus requis! Parfait pour une installation discrète.

Nouveau!
procédé



433-CMU

Unité central sans fil



GB-RI
Coussinet sensoriel Ghost** sans fil

** Brevet en cours d'homologation



433-PGD
Téléavertisseur pour personnel soignant avec affichage LCD

Nouveau pour 2010!



Deux en un Moniteur à cordelette & Moniteur à coussin sensoriel

Un moniteur qui fait le travail de deux. Le deux en un Smart, c'est un moniteur à cordelette magnétique et un moniteur pour coussinet sensoriel. Il élimine l'utilisation de deux moniteurs et facilite la manipulation du lit à au fauteuil – et l'inverse.

- Fonctionne avec cordelette ou coussinet (Pas les deux en même temps).
- Manipulation facile du lit à la chaise
- S'installe au lit ou à la chaise.
- Volume ajustable
- Fonctionne avec la majorité des systèmes de cloche d'appel.



TL-3100

Deux en Un, moniteur à cordelette avec bouton de pause et lumière témoin

TL-02
Moniteur à cordelette avec contact magnétique



Moniteur à cordelette Incassable

Caractéristiques:

- Sonnerie quand l'aimant est retiré
- Boîtier de protection en mousse incassable
- S'installe facilement du lit à la chaise. (fauteuil)



TL-2000

Moniteur incassable à cordelette avec aimant



Moniteur à cordelette avec téléavertisseur

Le moniteur à cordelette envoie un signal au téléavertisseur.



433-CMU

Moniteur central sans fil.

TL-2200PS

Moniteur à cordelette avec bouton de pause et lumière témoin. (Nécessite un 433-NCA soit un émetteur pour conversion sans fil.)

433-PGD

Téléavertisseur avec affichage LCD pour le personnel.

Garantie à vie Moniteur à cordelette

Si vous le brisez, nous le remplacerons, sans condition!

- Le bouton pause permet au personnel de réduire au silence, suite à une alarme, sans avoir à remettre l'aimant en place
- Pas d'interrupteur de courant, le moniteur se met en fonction dès que l'aimant est mis en place.
- La lumière "Status" permet au personnel de voir rapidement si le moniteur est en fonction.
- Le système auto séparateur réduit les risques d'étranglement. L'auto séparateur se sépare lorsqu'une tension trop forte est appliquée.
- L'attache de sécurité permet de fixer la cordelette au vêtement de façon sécuritaire.
- Une fiche pour le câblage du bouton d'appel.



TL-3000

Avec le boîtier en PVC.

www.extramedical.com

Les moniteurs de gestion de chute les plus simples, les plus sûres.

Chacun de ces moniteurs fonctionne avec tous les composants suivants.



ceinture



Coussinet sensoriel de fauteuil



Tapis sensoriel de sol



Coussinet sensoriel de lit

**Facile à utiliser
seulement un bouton!**

TL-2100S Moniteur à réamorçage automatique avec une clef magnétique.
Technologie brevetée



Prise pour bouton d'appel



Aucun besoin de mise de date en fonction!

TL-2100CP Indicateur de remplacement de coussinet



Le moniteur indiquera automatiquement quand remplacer le coussinet. Lorsque utilisé avec série TB-XX et TC-XX

Technologie Brevetée

CAREGIVER KEY™
Clef magnétique
Technologie Brevetée



Pour les budgets restreints.



TL-2100E Moniteur économique



Brevet en cours d'homologation



Protecteur de cordon

Utilisez une voix significative pour rassurer le patient.

Moniteur de gestion de chute enregistrable.

M. Tremblay, restez assis, nous arrivons!



TL-2100V Moniteur vocal à réamorçage automatique. (Utilise la majorité des coussinets sensoriels.)

Enregistrement de la voix. Utilisez une voix connue pour donner une directive lorsque le moniteur est activé par le patient.

Caregiver key™ La clef magnétique permet au personnel uniquement de désactiver le moniteur.

Caractéristique du moniteur de gestion de chute:

Safety Auto-Reset™. Remise en fonction automatique lorsqu'une pression est appliquée sur le coussinet ou utilisé avec une ceinture. (non disponible avec TL-2100)



La clef magnétique brevetée (Patented Caregiver Key™) permet au personnel de désactiver le moniteur.

"Pad Lost" Avertis le personnel avec son et signal lumineux chaque fois que le coussinet est débranché ou a cessé de fonctionner.

"Status Light" Lumière d'état de fonctionnement du moniteur et du coussinet, clignote tout les quatre (4) secondes.

"Low Battery" Indicateur de pile faible, avertis avec son et lumière que la pile doit être remplacée.

Délais permettant au patient de bouger sans enclencher le système d'avertissement.

"Nurse Call Output" Permet de brancher le moniteur directement au système de cloche d'appel.

Option de trois (3) tonalités.

www.extramedical.com

Protection du cordon, prévient les dommages à la prise et le câble.

Coussin de chute Smart

- Aide à protéger les patients des dommages corporels qui pourraient survenir lors d'une chute
- Bordure en biseau facilitant l'accès au fauteuil roulant et réduit le risque de trébucher.
- Peut être branché à un moniteur de chute ou au système de cloche d'appel.
- Un (1) pouce d'épaisseur, mousse absorbante en cas d'impact.
- Surface résistante non adhérente



FMS-01

Coussin de chute Smart

Image détaillée: bordure en biseau

Technologie innovatrice permettant au personnel soignant d'être averti si une pression est appliquée en surface.



Ceintures de fauteuil à avertissement préventif



TL-2109



TL-2109V

Sécuritaire et facile d'utilisation sans contrainte. La ceinture informe le moniteur lorsque le résident détache la boucle à dégagement rapide. Permettant d'avertir les préposés sans réduire la liberté de mouvement du résident. Une version avec fermeture Velcro est offerte pour les résidents ayant une dextérité réduite.

2 Boutons d'appel avec système de téléavertisseur à bas prix.

Caractéristiques incluses:

- Comprend deux (2) boutons d'appel et un (1) téléavertisseur de poche avec signal sonore.
- Comprend les piles et est prêt à l'usage.
- Peut être configuré pour être utilisé avec les coussins sensitifs de fauteuil et de lit ou les tapis de sol sensitifs.



TL-5102TP

Tapis de sol sensitif activé par le poids

Active le moniteur quand on marche sur le tapis

Nouveau!
Tapis de sol
sans fil.




Les tapis de sol avertissent le personnel soignant du passage du résident lorsqu'il marche sur celui-ci. Les tapis de sol sensitif peuvent être disposés près du lit ou devant une porte.

Technologie
Brevetée

Caractéristiques incluses:

- Coussin de vinyle scellé contre l'humidité.
- Tapis extra long pour le lit.
- Peut être utilisé avec bouton d'appel
- Peut avertir dans la chambre ou à l'extérieur de la chambre

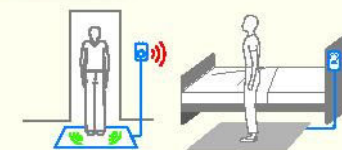

Les tapis de sol sensitifs fonctionnent avec les moniteurs Smart


Moniteur de détection de mouvement



TL-2800

Récepteur pour détecteur de mouvement sans fil.

Ce moniteur de détection de mouvement surveille les déplacements pour une section définie avec un champ infrarouge. Quand il est en position de long d'un lit, le moniteur va avertir que le patient tente de quitter son lit.

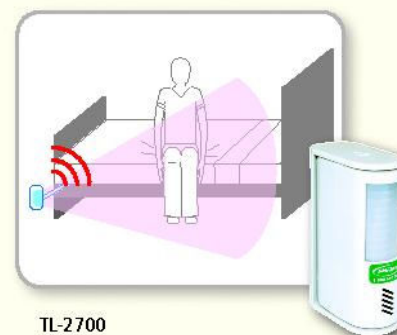

TL-2700

Capteur de mouvement autonome



TL-5102MP

Détecteur de mouvement et téléavertisseur.

Accès de surveillance complet avec système sans fil

Émetteurs sans fil



FM-07C Tapis de sol sans fil
Technologie Brevetée



Coussinet sensoriel de lit et de fauteuil
Technologie Brevetée



TL-2016NC
Bouton d'appel avec cordon



2007-CB, 2007-RB
Bouton d'appel pour salle de bain et bouton d'annulation

Récepteurs sans fil optionnel



TL-2015REV-02
Moniteur central

Lancez un appel jusqu'à un kilomètre!



2007-PG
Téléavertisseur de poche pour personnel soignant




2007-ECA
Alarme lumineuse de corridor

Système contre l'errance pour des institutions de toute taille.

S'installe facilement en 3 étapes

1. Installez le moniteur à la porte
2. Branchez le moniteur
3. Activez et installez le bracelet du résident.

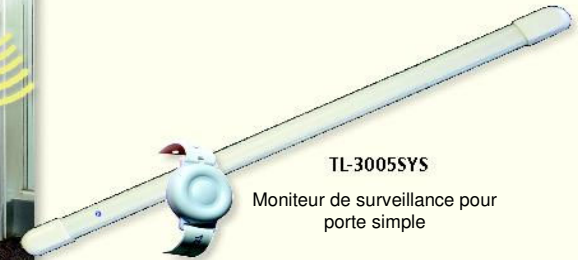

TL-3005SYS
Moniteur de surveillance pour porte simple

Les fonctions de « Smart Depart Alert™ » pour système de porte avec trois composants facile à utiliser: Une barre de porte, un commutateur magnétique et un bracelet pour résident. Quand le résident portant le bracelet tente de sortir par la porte, la barre d'alarme sonne et émet un signal visuel et peut aussi envoyer un signal au moniteur central.



TL-3005SYS
Porte simple avec commutateur de porte



TL-3004SYS
Porte double avec commutateur de porte



TL-2015REV-02
Moniteur central affichant quel résident ou composant a activé l'alerte.



TL-2010WKP
Clavier de commande de remise à zéro



DT-01
Vérificateur pour barre de porte & bracelet émetteur



TL-2014W
Bouton de remise à zéro



TL-2025
Serrure magnétique pour porte

Moniteur central et téléavertisseur économique

Moniteur de gestion de chute et de mobilité à bas prix



Tapis de sol sensitif sans fil
(Affiché: FM-07C avec TM-02)
Brevet en cours d'homologation



433-CMU
Moniteur central sans fil



Coussinet sensoriel de chaise et de lit
(Affiché:GC-W1 avec TM-02
et GB-W1 avec TM-02)



433-NC
Bouton d'appel sans fil



433-EXT
Détecteur d'ouverture de
porte ou de fenêtre sans fil



433-MS
Détecteur de mouvement sans fil



433-NCA
Adaptateur sans fil pour moniteur
de gestion de chute



Téléavertisseur de poche pour
personnel soignant 433-PGD

Moniteur central
sans fil à bas prix

Options matériel disponible

Moniteur central
sans fil à bas prix

Options matériel disponible

Clef de réinitialisation Caregivers™

(pour unité TL-2100CP, TL2100G, TL2100S, TL-2100V)
CK-01.....7

Moniteur central

Économique 433-CMU.....3,5,10,12

Accessoires

Adaptateur (utiliser avec série TL-2100) 433A-NCA.....13
Détecteur de mouvement 433A-MS2,12
Émetteur pour bouton d'appel 433-NC2,8,12
Téléavertisseur 433A-PG (non affiché dans ce dépliant)
Téléavertisseur avec affichage 433-PGD.....3,5,13
Grande institution TL-2105REV-01.....10,11

Accessoires

Bouton/corde pour salle de bain 2007-CB.....10
Bouton de remise à zéro pour salle de bain 2007-RB.10
Moniteur de chevet (permet l'utilisation de tapis sensoriel, tapis de sol et ceinture avec moniteur central) TL-2016REV
Barre de porte anti-fugue Depart Alert™.....11
Système pour porte double TL-3004SYS.....11
Système pour porte simple TL-3006SYS.....11
Lumière d'appel d'urgence pour corridor 2007-ECA10
Téléavertisseur 2007-PG10

Coussins de chute

Coussin de chute FMS-01.....8
Standard WC-01 (non affiché dans ce catalogue)
Sensoriel WC-03 (non affiché dans ce catalogue)
Butée de lit sécuritaire WC-04 (non affiché)

Fauteuil

Standard CC-01 (non affiché dans ce catalogue)
Avec alarme sensoriel CC-02 (non affiché)

Barre de porte «Depart Alert™ »11

Accessoires.....11

Bracelet pour aide soignant TL-2014

Barre de porte et vérificateur de bracelet DT-01.....11

Barrure magnétique TL-2025.....11

Aimant de remise à zéro CK-01D

Bracelet émetteur pour résident TL-2012S11

Moniteur central sans fil TL-2015REV11

Clavier de remise à zéro sans fil TL-2010WKP...11

Bouton de remise à zéro sans fil TL-2014W.....11

Bracelet de remplacement WB-03

Système pour porte double TL-3004SYS.....11

Système pour porte simple TL-3006SYS.....11

Moniteur Économique sans fil

Économique 433-HA.....2

Moniteur de chute.

Moniteur de gestion chute sans fil « Ghost » TL2100G.....3

Moniteur de gestion de chute, à cordelette et coussin sensitif TL-3100DUAL.....4

Moniteur de gestion de chute économique TL-2100E.....6

Moniteur de gestion de chute à enregistrement vocal TL-2100V.....6

Moniteur de gestion de chute à enregistrement vocal à cordelette TL-2005RV (non affiché dans ce catalogue)

Moniteur de gestion de chute à réarmement automatique TL-2100S6

Moniteur de gestion de chute avec «Change pad indicator » TL-2100CP.....7

Moniteur de lit avec interrupteur ouvert /fermé TL-03

Moniteur de fauteuil avec interrupteur ouvert/fermé TL-04

Moniteur de lit avec interrupteur ouvert /fermé TL-03

Moniteur de fauteuil avec interrupteur ouvert/fermé TL-04

Moniteur de lit avec interrupteur ouvert /fermé TL-03

Moniteur de fauteuil avec interrupteur ouvert/fermé TL-04

Tapis de sol sensoriel

Sans fil FM-07 (utilisé avec TL-2100G, 433-CMU, 433A-HA).....2,3,9,12

Standart (Utilisé avec tous les moniteurs de chute)

.....2,7,9,10,12

FM-03: 24"X36" Noir 1 an de garantie

FM-05: 24"X36" Gris 1 an de garantie

FM-06: 20"X30" Gris en vinyle 6 mois de garantie

FM-07: 24"X48" Gris 1 an de garantie

FM-08: 24"X48" Noir 1 an de garantie

FM-09: 24"X64" Noir 1 an de garantie

Déecteur de mouvement.....9,12

Moniteur autonome TL-2700.....9

Utilisation avec moniteur central 433-MS.....12

Avec téléavertisseur de poche TL-5102MP.....9

Avec avertisseur de corridor TL-2800.....9

Support de montage (non affiché)

Universel

Ridelle de lit & tête de lit MB-07B

Chaise roulante MB_07C

Utilisation avec détecteur de mouvement

Extensible MB-05

Crochet flexible avec pince MB-06

Utilisation avec moniteur à cordelette MB-09

Utilisation avec moniteur série TL-00

Ajustable pour fauteuil ou lit MB-01

Lit ou mur MB-02

Utilisation avec moniteur série TL-2100

Ajustable pour fauteuil ou lit MB-03

Lit ou mur MB-04

Bouton d'appel & cordes

Bouton avec corde pour salle de bain 2007-CB.....10

Bouton de remise à zéro pour salle de bain 2007-RB.....10

Bouton d'appel pour coté de lit (utiliser avec TL-2016REV) TL-2016NC

Bouton pour moniteur central 433-NC.....12

Bouton d'appel pour système de téléavertisseur TL-5102TP (viens avec 2 bouton d'appel et 1 téléavertisseur).....8

Émetteur modifié (pour utiliser avec moniteur de chute avec système TL-5102TP) TL-5102MOD

Émetteur modifié (pour utiliser avec moniteur de chute avec système TL-5102TP) TL-5102MOD

Téléavertisseur

Moniteur central de téléavertisseur 2007-PG (utiliser avec TL-2015REV-01).....10

Moniteur central de téléavertisseur avec affichage 433-PG (Utiliser avec 433-CMU pas affiché dans ce catalogue)

Moniteur central de téléavertisseur sans affichage 433-PGD (utiliser avec 433-CMU).....3,5,13

Téléavertisseur + détecteur de mouvement TL5102MP.....9

Système de bouton d'appel + téléavertisseur TL-5102TP (viens avec 2 bouton d'appel émetteur et un téléavertisseur9

Émetteur modifié (utiliser avec moniteur de chute et système TL-5102TP) TL-5102MOD

Moniteur à cordelette

TL-3100DUAL à cordelette et moniteur de gestion de chute4

Sans aimant "Blue bullet" TL-02B (non affiché)

Avec prise de contact TL-01 (non affiché)

Modèle ordinaire TL-024

Modèle économique TL-02P avec bouton de pause & indicateur lumineux. (non affiché)

TL-2200PS.....5

Incassable garantie à vie.....5

TL-20004

Avec bouton de pause & indicateur lumineux TL-3000.....5

Moniteur de chute à cordelette enregistrable TL-2005RV (non affiché)

Ceintures de fauteuil – ceintures de fauteuil à avertissement rapide

(utiliser avec tous les moniteurs de chute).....6,8

Boucle.....8

Velcro6,8

Coussinets sensoriels

Sans fil (à utiliser avec TL-2100G, 433-CMU).....3,10,13

Lit sans fil

GB-45: 45 jours garantie 10X30"

GB-90: 90 jours garantie 10X30"

GB-180: 180 jours garantie 10X30"

GB-R1: 1 an garantie 10X30"

GB-W1: 1 an garantie 20X30"

Fauteuil sans fil

GC-45: 45 jours garantie 10X15"

GC-90: 90 jours garantie 10X15"

GC-180: 180 jours garantie 10X15"

GC-W1: 1 an garantie 10X15"

Émetteur TM-02 (utiliser avec moniteur sans fil et tapis de sol sans fil).....3,11

Régulier (utiliser avec tous les moniteurs de chute)

Lit.....4,6,7

PPB-45: 45 jours garantie 10X30"

PPB-90: 90 jours garantie 5X30"

PPB-90W: 90 jours garantie 20X30"

PPB-180: 180 jours garantie 5X30"

PPB-180W: 180 jours garantie 20X30"

PPB-R1: 1 an garantie 10X30"

PPB-W1: 1 an garantie 20X30"

Fauteuil4,6,7

PPC-45: 45 jours garantie 7X14"

PPC-90: 90 jours garantie 7X15"

PPC-180: 180 jours garantie 7X15"

PPC-W1: 1 an garantie 10X15"

Toilette (non affiché dans ce catalogue)

PPT-1: 30 jours garantie

PPT-5: 30 jours garantie (paquet de 5)

Lit "Avec compteur " (utiliser avec TL-2100CP).....7

TB-45: 45 jours garantie 20X30"

TB-90R: 90 jours garantie 10X30"

TB-90W: 90 jours garantie 20X30"

TB-180R: 180 jours garantie 10X30"

TB-180W: 180 jours garantie 20X30"

TB-R1: 1 an garantie 10X30"

TB-W1: 1 an garantie 20X30"

Fauteuil "Avec compteur " (utiliser avec TL-2100CP).....7

TC-45: 45 jours garantie 10X15"

TC-90: 90 jours garantie 10X15"

TC-180: 180 jours garantie 10X15"

TC-W1: 1 an garantie 10X15"

Téléphone à composition automatique d'urgence

(non affiché dans ce catalogue)

Compositeur automatique ED-01

Bouton d'appel d'urgence pour résidant sans fil ED-01B